

TU GUÍA DE TRATAMIENTO **TEZPELUMAB**



El contenido se basa en el texto de Información al paciente aprobado por **ISP**.

¿Qué es Tezepelumab?

¿Qué es y para qué se utiliza?

- Tezepelumab es un anticuerpo monoclonal. Los anticuerpos son proteínas que reconocen y se unen a una sustancia específica en el organismo. En el caso de tezepelumab se une a una proteína llamada linfopoyetina estromal tímica (TSLP).¹
- La TSLP desempeña un papel clave en la inflamación de las vías respiratorias que causa los signos y síntomas del asma.¹
- Al bloquear la acción de la TSLP, este medicamento ayuda a reducir la inflamación y los síntomas del asma.¹

¿Para qué se utiliza?

Tezepelumab está indicado como tratamiento de mantenimiento complementario en pacientes con asma severa de 12 años de edad y mayores que no están adecuadamente controlados a pesar de la administración de corticosteroides inhalados a dosis altas en combinación con otro medicamento para el tratamiento de mantenimiento.¹

Conoce tu autoinyector²

Tezepelumab viene en un dispositivo listo para su uso

Etiqueta con fecha de caducidad


Fecha de caducidad: M1/2025

Ventana de visualización

Asegurarse de que el medicamento en la ventana de visualización sea claro y de color amarillo claro. Es normal ver pequeñas burbujas de aire en el líquido.

Tapa de la aguja

3

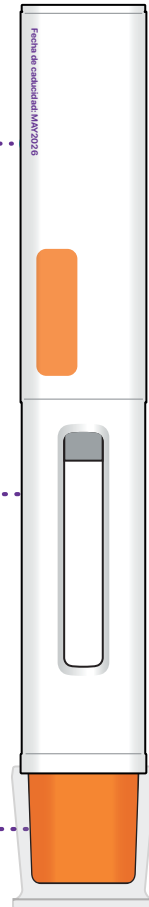

Antes de aplicar el medicamento²:

1

Deja que el autoinyector en su caja original alcance una **temperatura ambiente de entre 20°C y 25°C durante al menos 60 minutos.**

2

Ten en cuenta que el dispositivo, una vez administrado, debe desecharse en un **recipiente para objetos punzocortantes.**

Reunir los materiales para la aplicación



Autoinyector
Tezepelumab




Contenedor para eliminación
de objetos punzocortantes






Algodón con alcohol

4

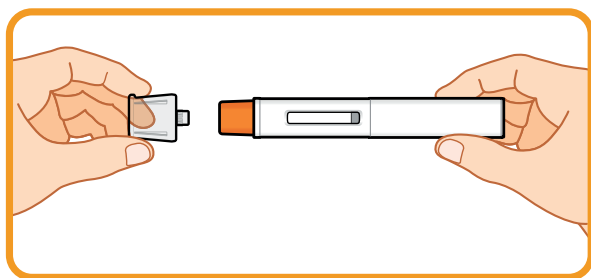Antes de aplicar Tezepelumab²



Retira cuidadosamente la tapa de forma recta con una mano sosteniendo el cuerpo del dispositivo.

-  **NO** tocar el protector de aguja, podría comenzar la salida del medicamento.
-  **NO** quitar la tapa hasta estar listo para aplicar inmediatamente, con el fin de mantener la aguja limpia y segura.
-  **NUNCA** volver a colocar la tapa después de la aplicación.

Selecciona y limpia el sitio de aplicación²

Los sitios de autoaplicación recomendados son la parte delantera del muslo o la parte inferior del estómago, 5 cm alrededor del ombligo.



Lavarse bien las manos con agua y jabón.




Limpiar el sitio de inyección con algodón y alcohol. Dejar que la piel se seque naturalmente.



Pasos clave para la aplicación²:

COLOCAR

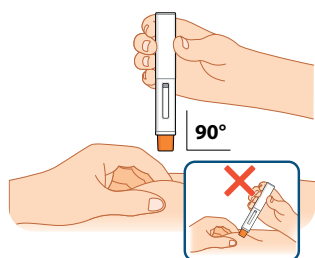

COLOCAR el dispositivo con el protector de aguja mirando directamente hacia la piel (ángulo de 90 grados).

- Asegurarse de poder ver la ventana de visualización.




NO presionar el dispositivo sobre la piel hasta estar listo para aplicar, ya que esto iniciará la salida del medicamento.



NO colocar inclinado el autoinyector, ya que es posible que no haya contacto completo con la piel, lo que puede evitar que se reciba la dosis completa.


CONSEJO: Si se pellizca la piel, es importante mantenerla de esta manera durante toda la aplicación.

PRESIONAR Y MANTENER²

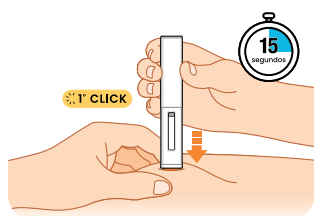


PRESIONAR Y MANTENER

presionado el dispositivo firmemente contra la piel durante aproximadamente 15 segundos.

- Asegurarse de que ya no se pueda ver el protector de aguja naranja.
 - Se escuchará el primer "clic", lo que significa que la aplicación ha comenzado.
 - Durante la aplicación, se verá cómo el émbolo naranja se mueve hacia abajo en la ventana de visualización.
-  **NO** cambiar la posición del autoinyector después de que haya comenzado la aplicación y continuar presionando durante toda la administración.

CONFIRMAR²

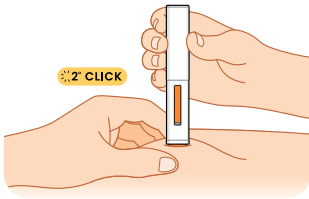

CONFIRMAR que la ventana de visualización se vuelva completamente naranja.

- Asegurarse de que ya no se pueda ver el protector de aguja naranja.
- El protector de aguja naranja se deslizará hacia abajo y se bloqueará en su lugar sobre la aguja.
- Levantar el autoinyector en línea recta después de completar la inyección.

CONSEJO: Verificar nuevamente que la ventana de visualización esté completamente naranja y que se haya recibido la dosis completa.

¿Cómo almacenar y desechar adecuadamente el autoinyector Tezepelumab²?



Colocar el dispositivo usado y la tapa en un **contenedor de eliminación de objetos punzocortantes** inmediatamente después de usarlo.



NO volver a colocar la tapa.



CAMINAR ACOMPAÑADO



800-64-64-20

De lunes a viernes de 9 a 18 hs



Escanear el QR

www.azconectados.cl



hola@azconectados.cl

AstraZeneca 

Esta guía no reemplaza al prospecto para pacientes que se proporciona con el medicamento y que los pacientes deben leer.

Te compartimos este material por cuanto tu médico te ha prescrito un medicamento de venta bajo receta de AstraZeneca S.A incluido en el Programa. Por favor consérvalo evitando su circulación entre el público.

Cualquier duda consultar a su médico.

AstraZeneca Chile. Isidora Goyenechea N.º 3477, piso 2, Las Condes, Santiago, Chile.

PromoMats: CL-7878 03/2026.©2026 AstraZeneca. Todos los derechos reservados.

Si desea consultar información, reportar un evento adverso o presentar un reclamo de calidad ingrese AQUÍ: <https://contactazmedical.astrazeneca.com/>